

Beatmungsgerät „ARIA & Heizung“

Einschulungsprotokoll

der RCU

Otto Wagner Spital

Tel. 01/91060/41635


von

Klebeetikette

--


Weitere Personen

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung




Geräteerklärung

- **Frontansicht**
- Ein-Ausschalter
- Einstellparameter (nur für ärztliches Personal)




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung



Geräteerklärung

- **Frontansicht**
- Display
- Ein-Ausschalter
- Rampentaste
- Kontrolllampen

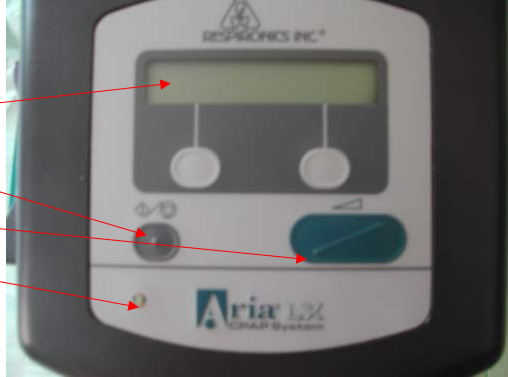

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

Geräteerklärung

- Rückansicht
- Schnittstelle für EDV
- Netzstecker
- Verschlusskappe für Filter

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

Filterwechsel

- Verschlusskappe entfernen
- Filter schwarz (Grobfilter) kontrollieren und bei Bedarf waschen und trocknen
- weißen (Feinfilter) Filter nach 30 Tagen wechseln

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung



Filterwechsel

- Verschlusskappe entfernen
- **Filter schwarz (Grobfilter) kontrollieren und bei Bedarf waschen und trocknen**
- weißen (Feinfilter) Filter nach 30 Tagen wechseln



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung




Filterwechsel

- Verschlusskappe entfernen
- Filter schwarz (Grobfilter) kontrollieren und bei Bedarf waschen und trocknen
- **weißen (Feinfilter) Filter nach 30 Tagen wechseln**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung




1.

- **Gerät an das Netz anschließen**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung



2. Heizung vorbereiten

- **Heizung ans Netz (Steckdose) schließen**
- durch hinunterdrücken der Abdeckung.....



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung



2.

- Heizung ans Netz (Steckdose) schließen
- **durch hinunterdrücken der Abdeckung.....**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung



2.

- **.....den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen**
- destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....
-bis zur schwarzen Markierung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

2.

-den **Wasserbehälter einführen und einrasten lassen**
- destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....
-bis zur schwarzen Markierung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

2.

-den **Wasserbehälter einführen und einrasten lassen**
- destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....
-bis zur **schwarzen Markierung**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung



3. Zusammenbau

- Druckadapter anstecken
- Druckschlauch anstecken




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung



3. Zusammenbau

- Druckadapter anstecken
- Druckschlauch anstecken



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

- Sauerstoffadapter an Sauerstoffrückschlagventil anbringen
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden



Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!


Sauerstoff aufdrehen!

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

3. Zusammenbau

- Kurzer Schlauch anstecken (vom Beatmungsgerät zur Heizung)




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						




Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

3. Zusammenbau

- **Langer Schlauch von der Heizung zur Maske**
- evtl. Ausatemventil anstecken
- Maske an den langen Schlauch anstecken
- Gerät ist einsatzbereit




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

3. Zusammenbau

- Langer Schlauch von der Heizung zur Maske
- **evtl. Ausatemventil anstecken**
- Maske an den langen Schlauch anstecken
- Gerät ist einsatzbereit



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

3. Zusammenbau

- Langer Schlauch von der Heizung zur Maske
- evtl. Ausatemventil anstecken
- **Maske an den langen Schlauch anstecken**
- **Gerät ist einsatzbereit**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

ALARM	URSACHE	BEHEBUNG
Leckalarm	PatientIn ist nicht korrekt angeschlossen Es gibt irgendwo im Schlauchsystem ein Loch Maske undicht	PatientIn anschließen Alle Schläuche überprüfen Maske korrigieren
Druckleitung anschließen	Schlauchsystem nicht angeschlossen	Schlauch anschließen

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Beatmungsgerät ARIA LX & Heizung

Wurde auf diese Pflgetätigkeiten eingeschult:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl:.....

(Name in Blockschrift)