


<p style="text-align: center;">Beatmungsgerät „Harmony 2“</p> <p style="text-align: center;">Einschulungsprotokoll der RCU Otto Wagner Spital Tel. 01/91060/41635</p>

<p>von</p>				
<p>Klebeetikette</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>				
<p>Weitere Personen</p> <table border="1"><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr></table>				

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Geräteerklärung

- Frontansicht
- Ein-Ausschalter
- Heizungsanschluß




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Geräteerklärung

- Display
- Benutzertasten
- Heizungstaste
- Rampentaste
- Alarm deaktivieren
- Alarm Aus Taste

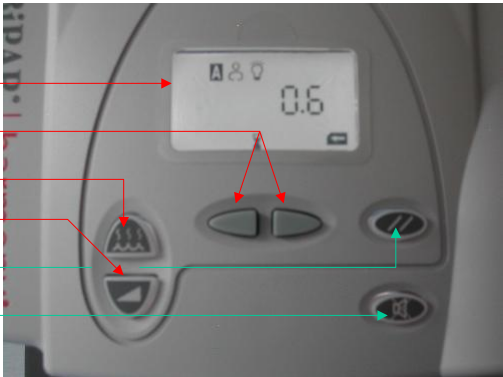


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Geräteerklärung

Kontrollleuchten:

- Netzanschluss
- Batteriebetrieb
- Für Alarme




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Geräteerklärung

- Basisstation
- Befeuchterkammer (abnehmbar)
- Netzadapter
- Netzstecker

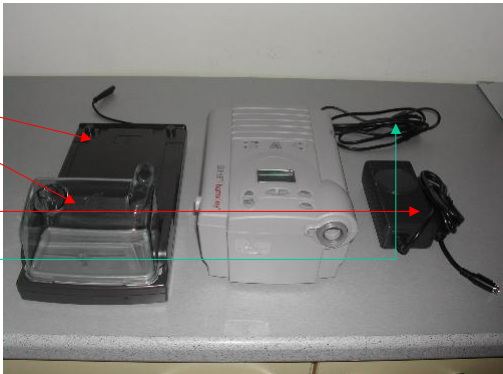


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Geräteerklärung

- Rückansicht
- Schnittstelle (nur für Firma)
- Anschluss für Netzadapter
- Netzstecker

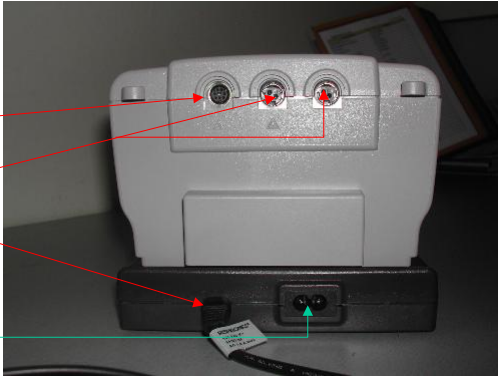

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

1. Geräte-zusammenbau

- Verbinden Sie das Gerät und Basisstation mit dem Adapter
- Schließen Sie die Basisstation mit Netzkabel an den Stromkreis an



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

1. Geräte- zusammenbau

- Verbinden Sie das Gerät und Basisstation mit dem Adapter
- **Schließen Sie die Basisstation mit Netzkabel an den Stromkreis an**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

2. Geräte- zusammenbau

- **Dichtungsring anbringen**
- Beatmungsgerät an Befeuchterkammer anstecken und in der Basisstation einrasten lassen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

**2. Geräte-
 zusammenbau**

- Dichtungsring anbringen
- **Beatmungsgerät an Befeuchterkammer anstecken und in die Basisstation einrasten lassen**

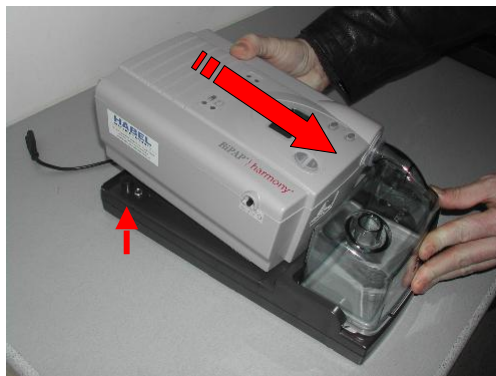

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

3.

- **Befeuchterkammer mit sterilem Wasser füllen (Aqua bidest.)**
- Bis zur Markierung max. befüllen (schlecht sichtbar)
- Kontrolllampe muss leuchten



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

3.

- Befeuchterkammer mit sterilem Wasser füllen (Aqua bidest.)
- **Bis zur Markierung max. befüllen** (schlecht sichtbar)
- **Kontrolllampe muss leuchten**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

4.

- **Sauerstoff-rückschlagventil anbringen**
- Beatmungsschlauch anbringen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

- Sauerstoffadapter an Sauerstoffrückschlagventil anbringen

- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden



Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!

Sauerstoff aufdrehen!


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

4.

- Sauerstoff-rückschlagventil anbringen

- **Beatmungsschlauch anbringen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

4.

- Maske mit Beatmungsschlauch verbinden
- Haube an die Maske anbringen
- Gerät ist Einsatzbereit



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

4.

- Maske mit Beatmungsschlauch verbinden
- Haube an die Maske anbringen
- Gerät ist Einsatzbereit



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

4.

- Maske mit Beatmungsschlauch verbinden
- Haube an die Maske anbringen
- **Gerät ist Einsatzbereit**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Filterwechsel

- **Abdeckkappe entfernen**
- Staubfilter entfernen bei grober Verschmutzung waschen

Achtung:
 Filter erst im trockenen Zustand wieder einsetzen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Filterwechsel

- Abdeckkappe entfernen
- **Staubfilter entfernen**
bei grober Verschmutzung waschen

Achtung:
Filter erst im trockenen Zustand wieder einsetzen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Filterwechsel

- **Feinfilter entfernen**
(bei Bedarf austauschen)
- Feinfilter „neu“
(weiß) einsetzen
- Grobfilter (schwarz) einsetzen
- Abdeckkappe anbringen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Filterwechsel

- Feinfilter entfernen
(bei Bedarf austauschen)
- **Feinfilter „neu“ (weiß) einsetzen**
- Grobfilter (schwarz) einsetzen
- Abdeckkappe anbringen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Filterwechsel

- Feinfilter entfernen
(bei Bedarf austauschen)
- Feinfilter „neu“ (weiß) einsetzen
- **Grobfilter (schwarz) einsetzen**
- Abdeckkappe anbringen

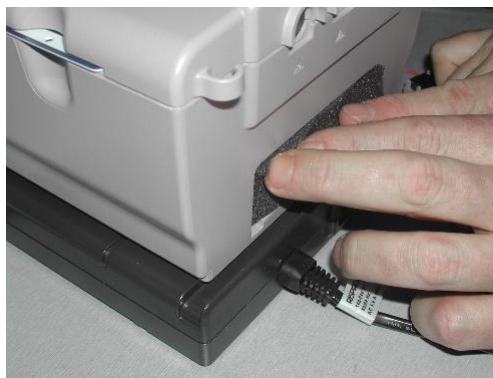

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Filterwechsel

- Feinfilter entfernen
(bei Bedarf austauschen)
- Feinfilter „neu“
(weiß) einsetzen
- Grobfilter (schwarz)
einsetzen
- **Abdeckkappe
anbringen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Zur Information

- An der Seite des
Gerätes befindet sich
eine „SmartCard“
Diese zeichnet
technische Daten auf.
Bitte achten Sie
darauf das die Karte
eingerastet ist.



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Hygiene

- **Befeuchterkammer aus der Verankerung herausziehen**
- Befeuchterkammer öffnen und mit Seifenlösung reinigen.....



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Hygiene

- Befeuchterkammer aus der Verankerung herausziehen
- **Befeuchterkammer öffnen und mit Seifenlösung reinigen.....**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Hygiene

.....und im trockenen Zustand zusammenbauen und wieder einsetzen.




Achtung:

Wasser erst bei Inbetriebnahme des Gerätes einfüllen

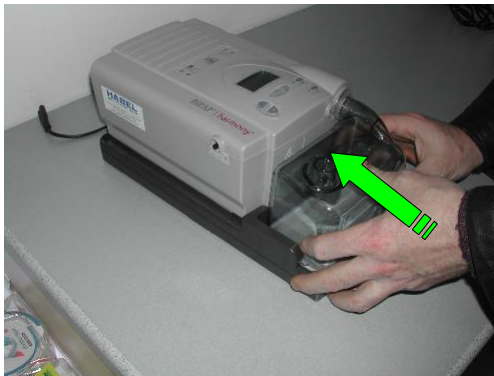

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

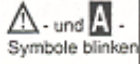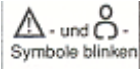ALARM	URSACHE	BEHEBUNG
Apnoe Alarm  Symbole blinken	PatientIn hat Atempausen	Bei oftmaligen Auftreten wenden sie sich an ihren med. Betreuer
Diskonnektionsalarm rot blinkend  Symbole blinken	PatientIn ist nicht korrekt angeschlossen Es gibt irgendwo im Schlauchsystem ein Loch Maske undicht	PatientIn anschließen Alle Schläuche überprüfen Schläuche unverzüglich wechseln Maske korrigieren
Technischer Alarm 	Maschine defekt	Sofort Firma benachrichtigen

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Hinweis:

Weitere Alarmer und Alarmsymbole entnehmen Sie aus dem PatientInnenhandbuch!

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Beatmungsgerät „Harmony 2 & Heizung

Wurde auf diese Pfl egetätigkeiten eingeschult:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....

(Name in Blockschrift)