


<p style="text-align: center;">Beatmungsgerät „SmartAir“</p> <p style="text-align: right;"> LLUNGE Otto Wagner Spital</p>
<p style="text-align: center;">Einschulungsprotokoll der RCU Otto Wagner Spital Tel. 01/91060/41635</p>

<p>von</p>				
<p>Klebeetikette</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>				
<p>Weitere Personen</p> <table border="1"><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr></table>				

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

Geräteerklärung
Frontansicht

- **Display**
- **Alarme löschen**
- **Ein/Aus Schalter**
- **Bedientasten für medizinisches Personal**

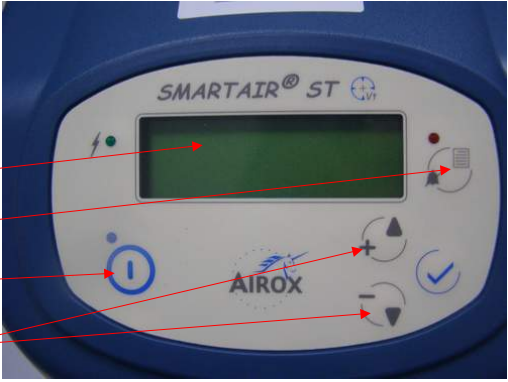

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

Geräteerklärung
Frontansicht

- **Beatmungsschlauch Anschluss**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						




Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung


Geräteerklärung

Rückansicht

- **Filter**
- **Hauptschalter**
- **Netzanschluss**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

1. Zusammenbau

- **Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

1. Zusammenbau


- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz



Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

- Achten Sie immer darauf, dass der Hauptschalter „Ein“ ist




Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

2.Befeuchter

- Befeuchter an das Netz (Steckdose) geben
- **durch hinunterdrücken der Abdeckung.....**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

2.Befeuchter

- **den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen**
- destilliertes steriles Wasser einfüllen (Apotheke).....
-bis zur schwarzen Markierung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						




Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

2.Befeuchter

- den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen
- **destilliertes steriles Wasser einfüllen (Apotheke).....**
- maximal bis zur schwarzen Markierung




Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							



Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

2.Befeuchter

- den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen
- destilliertes steriles Wasser einfüllen (Apotheke).....
- **Maximal bis zur schwarzen Markierung**



Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							



Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

- Sauerstoffadapter an das Gerät anbringen – zwischen Gerät und kurzem Schlauch
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden




Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!

Sauerstoff aufdrehen!




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

3.System-zusammenbau

- kurzer Schlauch vom Gerät zum Befeuchter
- langer Schlauch von der Heizung zur Maske



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

**3.System-
zusammenbau**

- **kurzer Schlauch vom Gerät zum Befeuchter**
- langer Schlauch von der Heizung zur Maske


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

**3.System-
zusammenbau**

- **kurzer Schlauch vom Gerät zum Befeuchter**
- **langer Schlauch von der Heizung zur Maske**


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						




Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

3. System- zusammenbau

- langer Schlauch von der Heizung zur Maske
- evtl. Ausatemventil anstecken
- **Maske an den langen Schlauch anstecken**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						




Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

Filterwechsel

- Entfernen Sie den Filter bei sichtlicher Verschmutzung und ersetzen Sie ihn durch einen Neuen

Cave: Nicht waschen!



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

Filterwechsel

- Entfernen Sie den Filter bei sichtlicher Verschmutzung und ersetzen Sie ihn durch einen Neuen

Cave: Nicht waschen!



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

Filterwechsel


- Entfernen Sie den Filter bei sichtlicher Verschmutzung und ersetzen Sie ihn durch einen Neuen

Cave: Nicht waschen!



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung						
ALARM	URSACHE	BEHEBUNG				
Blockieren Angeordnetes Signal	Platzen Reinigungssystem gerät	Platzveränderung				
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung						
<p>1. Hygienemaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser • Bringen Sie das Wasser zum kochen • Nehmen Sie den Topf vom Herd 						
1 mal pro Woche						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

1.

- Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser
- **Bringen Sie das Wasser zum kochen**
- Nehmen Sie den Topf vom Herd



1 mal pro Woche

Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung


1.

- Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser
- Bringen Sie das Wasser zum kochen
- **Nehmen Sie den Topf vom Herd**



1 mal pro Woche


Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							



Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung


2.

- **Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser durch**
- Legen Sie die Beatmungsschläuche in das heiße Wasser



1 mal pro Woche


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

2.

- **Legen Sie die Beatmungsschläuche in das heiße Wasser**
- **VORSICHT: Verbrennungsgefahr**




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

2.
VORSICHT:
 Verbrennungs-
 gefahr

- Lassen Sie die Beatmungsschläuche maximal 5min.im heißen Wasser




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung


2.

- Hängen Sie die Beatmungsschläuche zum trocknen auf z.b über einen Wäscheständer



1 mal pro Woche


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung


3.

- Spülen Sie die **Beatmungsschläuche mit Wasser aus**
- Geben Sie in einen Behälter Flüssigseife
- Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus



2 mal pro Woche


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

3.

- Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser aus
- **geben Sie in einen Behälter etwas Flüssigseife**
- Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

3.

- Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser aus
- Geben Sie in einen Behälter etwas Flüssigseife
- **Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus**




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

3.

- Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser aus
- Geben Sie in einen Behälter Flüssigseife
- **Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus**




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

4.

- Abspülen und Trocknen des Sauerstoffadapters
- Abspülen und Trocknen des Ausatemventils



2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

5.


- Die Maskengurten manuell oder in der Waschmaschine bei 30° waschen
- „nicht in den Wäschetrockner geben“
- trocknen der Maskengurten



1 mal pro Monat / bei Bedarf


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung



6.


- Waschen sie Ihre Maske täglich mit Seifenwasser und trocknen sie diese anschließend gut ab



1 mal pro Tag


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung



7.

- Wasserbehälter öffnen und....
- auseinander nehmen....




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

7.

- Wasserbehälter öffnen und....
- **auseinander nehmen....**




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

7.

- **mit Seifenwasser abwaschen und....**
- mit Wasser gut abspülen
- „oder im Geschirrspüler reinigen“




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung

7.

- mit Seifenwasser abwaschen und....
- **mit Wasser gut abspülen und trocken wischen** (z.B. Küchenrolle)
- „oder im Geschirrspüler reinigen“




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung


8.

- **Beatmungsgerät täglich abwischen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung		
AKKU-Test des Beatmungsgerätes		
Seriennummer:..... Beatmungsgerät 2.		
Datum:	Testbeginn: Uhrzeit	Voralarm: Uhrzeit
Anmerkungen:		
AKKU: leer	Uhrzeit:	
Anmerkungen:		

Beatmungsgerät „SmartAir“ & Heizung	
	
Wurde auf diese Pflgetätigkeiten eingeschult:	
Unterschrift:.....	
(Name in Blockschrift)	
erfolgreicher Abschluss der Einschulung:	
Unterschrift Sr/Pfl.:.....	
(Name in Blockschrift)	