

Beatmungsgerät „Trend 300/500“

Einschulungsprotokoll

der RCU
Otto Wagner Spital
Tel. 01/91060/41635

von

Klebeetikette

--

Weitere Personen


Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung


Geräteerklärung
Frontansicht

- Ansatz für Heizung
- Ein-Ausschalter




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung


Geräteerklärung

- Display
- Weckfunktion
- Pfeiltaste zum einstellen des Weckers
- Ansatz für Druckschlauch

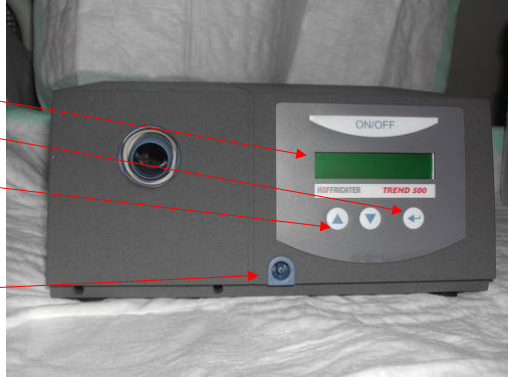


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Geräteerklärung

Rückansicht

- Netzstecker
- Stecker für EDV und Technik
- Ein-Ausschalter
Hauptschalter

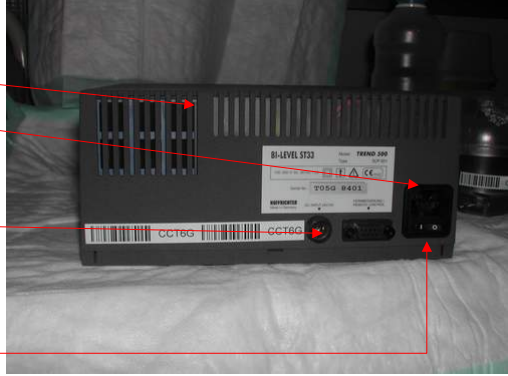

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Geräte- zusammenbau

- Gerät mittels
Netzstecker an die
Stromversorgung
nehmen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Hinweis

zum Entfernen des Heizungsbehälters drücken Sie den Knopf an der Oberseite des Beatmungsgerätes



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

**Geräte-
zusammenbau**

- nehmen Sie den **Deckel des Behälters ab**
- Füllen Sie den Behälter mit sterilem Wasser (Aqua bidest.) (bis zur Markierung)




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

**Geräte-
zusammenbau**

- nehmen Sie den Deckel des Behälters ab
- **Füllen Sie den Behälter mit sterilem Wasser (Aqua bidest.) (bis zur Markierung)**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

**Geräte-
zusammenbau**

- **stecken Sie die Heizung an das Gerät an**
- schließen Sie den Beatmungsschlauch an den Ansatz



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

**Geräte-
zusammenbau**

- schalten Sie die Heizung ein (Drucksensoren)
- Achten Sie darauf dass die roten Lampen aufleuchten



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung


- Sauerstoffadapter an Sauerstoffrückschlagventil anbringen
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden

Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!

Sauerstoff aufdrehen!




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung


**Geräte-
zusammenbau**

- stecken Sie die Heizung an das Gerät an
- **schließen Sie den Beatmungsschlauch an**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung


**Geräte-
zusammenbau**

- stecken Sie den Druckschlauch an den dafür vorgesehenen Ansatz



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung



**Geräte-
zusammenbau**

- Maske mit Beatmungsschlauch verbinden
- Ihr Gerät ist nun einsatzbereit



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung



Filterwechsel

- drücken Sie den Knopf an der Unterseite des Gerätes
- entnehmen Sie die Filterkassette
- wechseln Sie den Filter



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Filterwechsel

- drücken Sie den Knopf an der Unterseite des Gerätes
- **entnehmen Sie die Filterkassette**
- wechseln Sie den Filter




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Filterwechsel

- drücken Sie den Knopf an der Unterseite des Gerätes
- entnehmen Sie die Filterkassette
- **wechseln Sie den Filter**

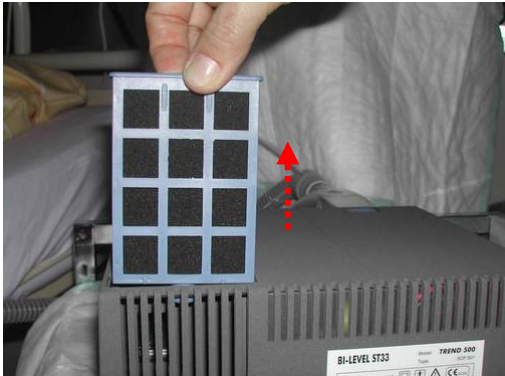

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung


Filterwechsel

- **Achten Sie beim Einsetzen der Kassette auf die Farben**
- **Schwarz zeigt zur Rückseite**
- **Weiß zeigt zur Vorderseite**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung


Filterwechsel

- **Achten Sie beim Einsetzen der Kassette auf die Farben**
- **Schwarz zeigt zur Rückseite**
- **Wei zeigt zur Vorderseite**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Reinigung des Befeuchters

- öffnen sie den Befeuchter
- **reinigen sie die Kammer mittels Seifenlösung**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Reinigung des Befeuchters

- **spülen Sie die Kammer mit klarem Wasser aus**
- trocknen sie die Kammer anschließend gut ab

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Reinigung des Befeuchters

- spülen Sie die Kammer mit klarem Wasser aus
- **trocknen sie die Kammer anschließend gut ab**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Reinigung des Schlauches

Merke:

verschließen Sie die Mess-Schläuche an beiden Enden immer mittels der Verschluss-Stopfen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Reinigung der Schläuche

- spülen Sie die Beatmungs-Schläuche innen und außen mit Seifenlösung gut durch

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Reinigung der Schläuche

- spülen Sie die Beatmungs-Schläuche anschließend unter fließendem Wasser innen und außen gut durch

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

Reinigung der Schläuche

Achtung:

- lassen Sie die Schläuche gut austrocknen bevor Sie Ihr Beatmungsgerät wieder verwenden

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Trend 300/500 & Heizung

4.

- Abspülen und trocknen des Sauerstoff-adapters

2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

