

# Beatmungsgerät „Trend 500“

## Einschulungsprotokoll


der RCU  
Otto Wagner Spital  
Tel. 01/91060/41635

von

Klebeetikette

--


Weitere Personen


### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Geräteerklärung**  
Frontansicht

- Ansatz für Heizung
- Ein-Ausschalter




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Geräteerklärung**

- Display
- Weckfunktion
- Pfeiltaste zum einstellen des Weckers
- Ansatz für Druckschlauch

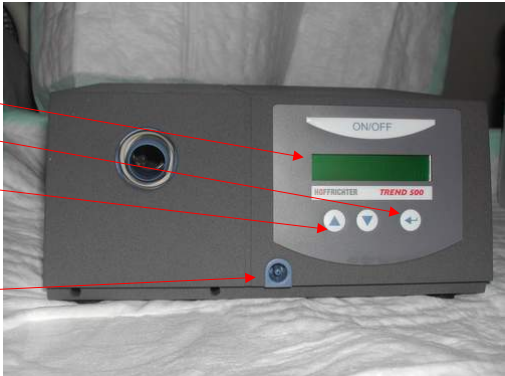


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Geräteerklärung**

**Rückansicht**

- Netzstecker
- Stecker für EDV und Technik
- Ein-Ausschalter  
Hauptschalter

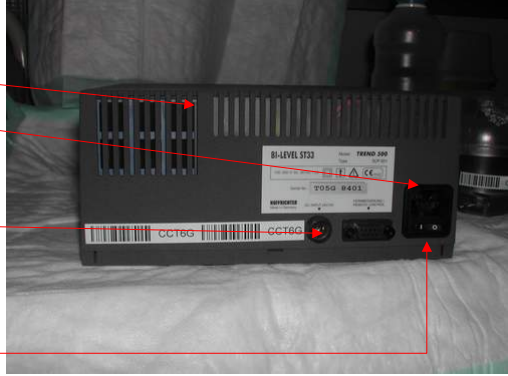


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Hinweis**

zum Entfernen des Heizungsbehälters drücken Sie den Knopf an der Oberseite des Beatmungsgerätes

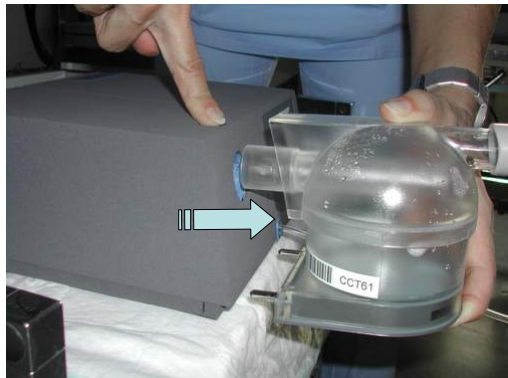

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

**Geräte-  
zusammenbau**

- **nehmen Sie den Deckel des Behälters ab**
- Füllen Sie den Behälter mit sterilem Wasser (Aqua bidest.) (bis zur Markierung)


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

**Geräte-  
zusammenbau**

- nehmen Sie den Deckel des Behälters ab
- **Füllen Sie den Behälter mit sterilem Wasser (Aqua bidest.) (bis zur Markierung)**


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Geräte-  
zusammenbau**

- schalten Sie die Heizung ein (Drucksensoren)
- Achten Sie darauf dass die roten Lampen aufleuchten



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Geräte-  
zusammenbau**

- Gerät mittels Netzstecker an die Stromversorgung nehmen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Geräte-  
zusammenbau**


- stecken Sie die Heizung an das Gerät an
- schließen Sie den Beatmungsschlauch an den Ansatz

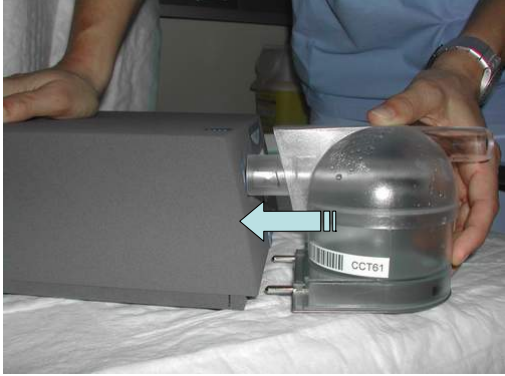

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung


- Sauerstoffadapter an Sauerstoffrückschlagventil anbringen
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden



Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!

Sauerstoff aufdrehen!


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Geräte-  
zusammenbau**

- stecken Sie die Heizung an das Gerät an
- **schließen Sie den Beatmungsschlauch an**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Geräte-  
zusammenbau**

- stecken Sie den Druckschlauch an den dafür vorgesehenen Ansatz



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**




**Geräte-  
zusammenbau**

- **Maske mit Beatmungsschlauch verbinden**
  
- **Ihr Gerät ist nun einsatzbereit**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**



**Filterwechsel**

- **drücken Sie den Knopf an der Unterseite des Gerätes**
- **entnehmen Sie die Filterkassette**
- **wechseln Sie den Filter**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung




#### Filterwechsel

- drücken Sie den Knopf an der Unterseite des Gerätes
- **entnehmen Sie die Filterkassette**
- wechseln Sie den Filter




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung




#### Filterwechsel

- drücken Sie den Knopf an der Unterseite des Gerätes
- entnehmen Sie die Filterkassette
- **wechseln Sie den Filter**

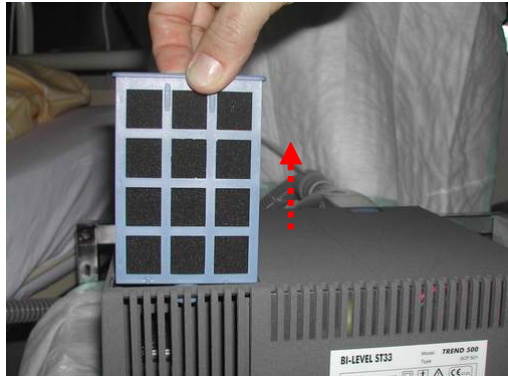


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						




## Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Filterwechsel**

- **Achten Sie beim Einsetzen der Kassette auf die Farben**
- **Schwarz zeigt zur Rückseite**
- **Weiß zeigt zur Vorderseite**

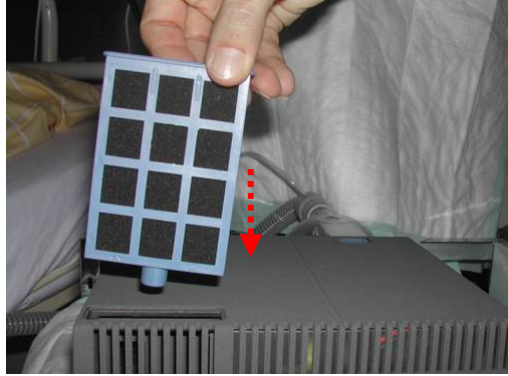


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



## Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung

**Filterwechsel**

- **Achten Sie beim Einsetzen der Kassette auf die Farben**
- **Schwarz zeigt zur Rückseite**
- **Weiß zeigt zur Vorderseite**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

### Reinigung des Befeuchters

- öffnen sie den Befeuchter
- **reinigen sie die Kammer mittels Seifenlösung**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

### Reinigung des Befeuchters


- **spülen Sie die Kammer mit klarem Wasser aus**
- trocknen sie die Kammer anschließend gut ab

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

### Reinigung des Befeuchters

- spülen Sie die Kammer mit klarem Wasser aus
- **trocknen sie die Kammer anschließend gut ab**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

### Reinigung des Schlauches

**Merke:**

**verschließen Sie die Mess-Schläuche an beiden Enden immer mittels der Verschluss-Stopfen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

**Reinigung der Schläuche**

- spülen Sie die Beatmungs-Schläuche innen und außen mit Seifenlösung gut durch

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

**Reinigung der Schläuche**

- spülen Sie die Beatmungs-Schläuche anschließend unter fließendem Wasser innen und außen gut durch

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

**Reinigung der Schläuche**

**Achtung:**

- lassen Sie die Schläuche gut austrocknen bevor Sie Ihr Beatmungsgerät wieder verwenden

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung**

**4.**

- Abspülen und trocknen des Sauerstoff-adapters


**2 mal pro Woche**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Beatmungsgerät „Trend 500 & Heizung” 	
Wurde auf diese Pfl egetätigkeiten eingeschult:	
Unterschrift:..... (Name in Blockschrift)	
erfolgreicher Abschluss der Einschulung:	
Unterschrift Sr/Pfl.:..... (Name in Blockschrift)	