


<p style="text-align: center;"><b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Einschulungsprotokoll</b> der RCU Otto Wagner Spital Tel. 01/91060/41635</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>von</b></p>				
<p>Klebeetikette</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>				
<p>Weitere Personen</p> <table border="1"><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr></table>				

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**Geräteerklärung**

- Frontansicht
- Display
- Ein-Aus Schalter
- Rampentasten (5/10/20min)
- Alarmtaste




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**Geräteerklärung**

- Rückansicht
- Filter
- Ein-Aus Hauptschalter
- Netzstecker

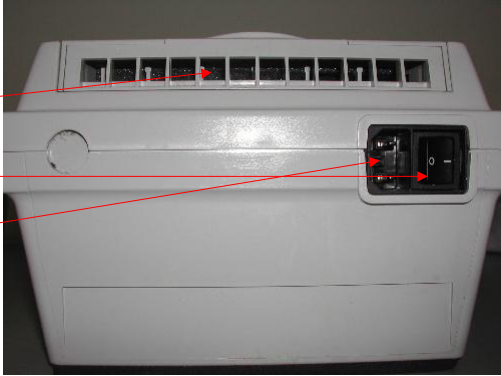


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**Heizung**  
**Geräteerklärung**

- Ein-Aus Schalter
- Temperaturregler
- Kontrollleuchten
- Klappenöffner
- Schlauchauslässe

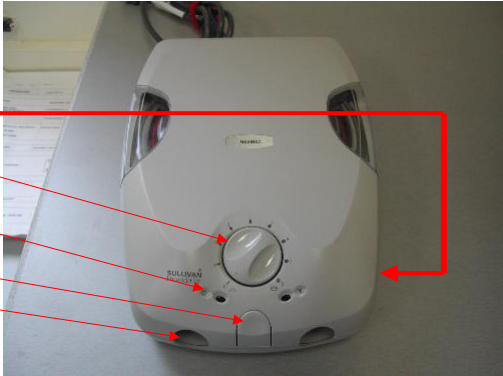


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**


**1.Zusammenbau**


- Netzstecker anschließen und an die Steckdose anbringen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Heizung an Steckdose anbringen</b></li> <li>• Heizungsdeckel öffnen</li> <li>• Wasserbehälter öffnen (3 Klappen nach oben)</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizung an Steckdose anbringen</li> <li>• <b>Heizungsdeckel öffnen</b></li> <li>• Wasserbehälter öffnen (3 Klappen nach oben)</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizung an Steckdose anbringen</li> <li>• Heizungsdeckel öffnen</li> <li>• <b>Wasserbehälter öffnen (3 Klappen nach oben)</b></li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Steriles Wasser einfüllen ca. 2/3 voll (von der Apotheke)</b></li> <li>• Den Deckel verschließen und mit den 3 Klappen fixieren und auf Dichtheit überprüfen</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**1. Zusammenbau**


- Steriles Wasser einfüllen ca. 2/3 voll (von der Apotheke)
- **Den Deckel verschließen und mit den 3 Klappen fixieren und auf Dichtheit überprüfen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

- **Mit diesem Regler können Sie die gewünschte Temperatur wählen**

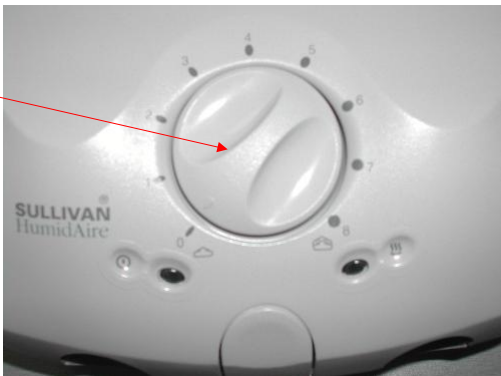


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**Reinigung**


- Reinigen Sie Ihre Befeuchterkammer täglich mit Seifenlösung
- Trocknen Sie Ihre Befeuchterkammer gut aus



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**


- Sauerstoffadapter anbringen
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden




Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!


Sauerstoff aufdrehen!


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						
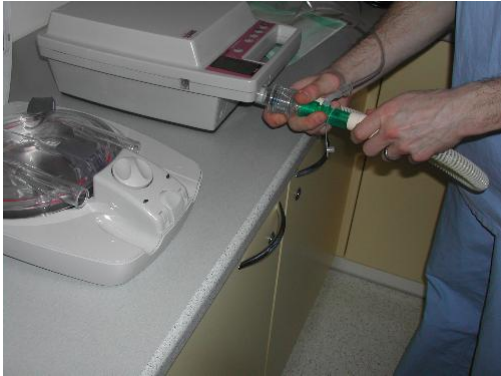
<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kurzer Beatmungsschlauch vom Beatmungsgerät.....</b></li> <li>• ...</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						
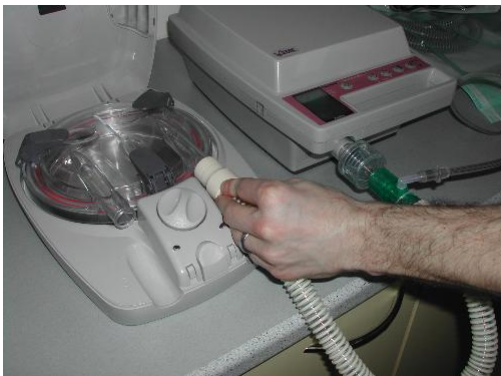
<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....zur Heizung anbringen</li> <li>• langer Beatmungsschlauch von der Heizung zum Patienten</li> <li>• Deckel der Heizung schließen</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....zur Heizung anbringen</li> <li>• <b>langer Beatmungsschlauch von der Heizung zum Patienten</b></li> <li>• Deckel der Heizung schließen</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....zur Heizung anbringen</li> <li>• langer Beatmungsschlauch von der Heizung zum Patienten</li> <li>• <b>Deckel der Heizung schließen</b></li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**1.Zusammenbau**

**Achtung:**

- Stellen Sie das Beatmungsgerät immer auf die Heizung




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**1.Zusammenbau**

- Ausatemventil an den Beatmungsschlauch anstecken
- Maske am Ausatemventil befestigen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**1. Zusammenbau**

- Ausatemventil an den Beatmungsschlauch anstecken
- **Maske am Ausatemventil befestigen**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**2. Filterwechsel**

- **Öffnen Sie die Abdeckung**
- Entnehmen Sie die Filter
- Ersetzen Sie den Feinfilter (rosa) der Grobfilter nur bei Bedarf (gelb)




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**

**2.Filterwechsel**

- Öffnen Sie die Abdeckung
- **Entnehmen Sie die Filter**
- Ersetzen Sie den Feinfilter (rosa) der Grobfilter nur bei Bedarf (gelb)




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


**Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung**


**2.Filterwechsel**

- Öffnen Sie die Abdeckung
- Entnehmen Sie die Filter
- **Ersetzen Sie den Feinfilter (rosa) der Grobfilter nur bei Bedarf (gelb)**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>2.Filterwechsel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Setzen Sie die neuen Filter ein</b></li> <li>• Und schließen Sie dann die Abdeckkappe</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>2.Filterwechsel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie die neuen Filter ein</li> <li>• <b>Und schließen Sie dann die Abdeckkappe</b></li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung						
ALARM	URSACHE	BEHEBUNG				
Maske ab + akustischer Signal	Maske wurde entfernt Maske oder Beatmungsschlauch undicht	Maske korrekt positionieren Maske und Schlauchsystem kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Druck unterschritten	Schlauch undicht oder lose	Schlauch kontrollieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Möglicher Gerätefehler	Firma verständigen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Druck überschritten	Möglicher Gerätefehler	Firma verständigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP II / ST“ & Heizung						
ALARM	URSACHE	BEHEBUNG				
Akustischer Alarm	Stromausfall Oder Gerät nicht angesteckt	Stromquelle sichern Gerät anstecken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

